

臓器固定用デバイスⅡ

# トリオリフター

t r i o l i f t e r



# トリオリフター


trio lifter



内視鏡手術の際  
臓器を3つの吸盤で吸引固定できます。

## [特徴]


- リングで固定された3つの吸盤で、臓器を面で吸引固定できます。
- 吸盤の吸引口に設けられたフランジにより、柔軟な臓器でも牽引が可能です。
- リングを押し潰すことで小切開口から挿入が可能です。
- リングにはワイヤーを内蔵しているため、押し潰して挿入しても元の形状に戻ります。

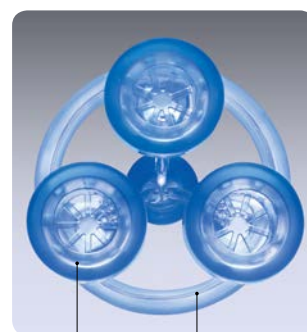


吸盤 リング

## [外観図]

臓器固定用チューブ

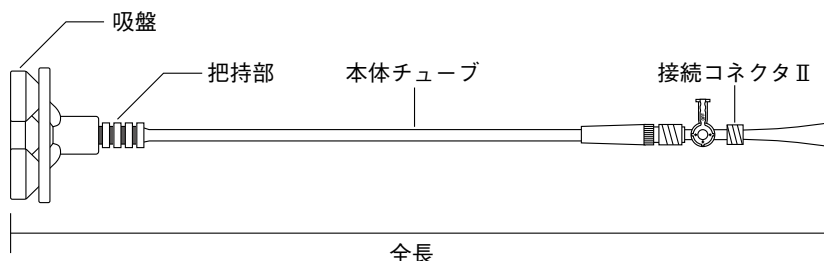

付属品

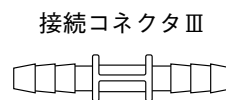

## [規格・仕様]

製品番号	リング部外径	吸盤部外径	全長
0181030	37mm	17mm	434mm

包装単位：1本/箱 滅菌済 単回使用  
付属品：接続コネクタⅢ

販売名：臓器固定用デバイスⅡ  
一般的名称：単回使用臓器固定用圧子  
クラス分類：管理医療機器  
医療機器認証番号：228ADBZX00111000

※使用上の注意に関しては、右記 QR コードより電子添文にてご確認ください。

※本カタログに掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

